

VALIDAÇÃO E BOAS PRÁTICAS

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

BIÓPSIAS

- ☐ Acondicionamento em tubos, microtubos, frascos de vidro ou plástico, estéreis, vedados de forma a impedir vazamento durante o transporte.
- ☐ Fixadas em quantidade suficiente de formol.
- ☐ Identificadas com o nome completo do paciente e com letra legível em etiqueta auto colante.
- ☐ Acompanhada da requisição do exame descrevendo o material com assinatura e CRM do médico solicitante.

BLOCOS E LÂMINAS

- ☐ Blocos e lâminas com requisição do exame descrevendo o material com assinatura e CRM do médico solicitante.
- ☐ Blocos e lâminas com o correto número de identificação correlacionado no pedido médico.

CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO DE AMOSTRAS

BIÓPSIAS

- ☐ Amostras sem identificação, com dados incorretos sobre o paciente.
- ☐ Amostras com identificação duvidosa.
- ☐ Armazenamento de forma incorreta.
- ☐ Amostras não vedadas.
- ☐ Recipientes quebrados ou rachados com extravasamento de material biológico.
- ☐ Amostras sem material biológico.
- ☐ Amostras sem fixador.
- ☐ Amostras sem o pedido médico devidamente assinado e com CRM.

BLOCOS E LÂMINAS

- ☐ Blocos e lâminas sem o pedido médico.
- ☐ Blocos e lâminas com numeração incorreta não correlacionada com o pedido médico.

CONTATO PESSOAL E AMIGÁVEL

RELACIONAMENTO COM **CLIENTES**

WHATSAPP

21 99770-3723
Recepção

21 99888-6414
Solicitação de Clientes

ouvidoria@fontemd.com.br

Dra. ANDRÉA R. C. PIRES
Diretora Médica
andreapires@fontemd.com.br

CLÁUDIO R. C. PIRES
Diretor Executivo
claudiopires@fontemd.com.br

Dra. LAURA P. FAJARDO
Diretora Médica Regional (Rio)
laura@fontemd.com.br

PLANOS CREDENCIADOS



PARA EXAMES DE IMUNO-HISTOQUÍMICA E HIBRIDIZAÇÃO IN SITU, ACESSE:

- fontemd.com/listagem-de-anticorpos
- fontemd.com/lista-de-sondas-fish

MÍDIAS SOCIAIS

instagram.com/fontemd
facebook.com/fontemd
twitter.com/@fontemd

linkedin.com/company/fontemd
youtube.com/user/fontemediag
br.pinterest.com/fontemd

Rua São Sebastião, 18 - 11º andar, Niterói, Ingá, RJ - CEP 24.210 - 110


FONTE

patologia oncológica

21 2622.3348 / 2613.4211
CONTATO@FONTEMD.COM.BR FONTEMD.COM.BR

Como enviar o seu MATERIAL DE EXAME para diagnóstico anátomo-patológico

Em acordo com a resolução ANVISA - RDC 504, sobre o transporte de material biológico humano caracterizado como espécime humano de risco mínimo e isento de microorganismos

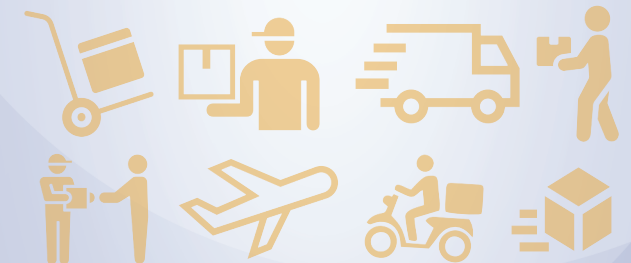

Certificados de Qualidade:



RESPEITO PELA VIDA

CIÊNCIA A SERVIÇO SAÚDE



ENVIO DA AMOSTRA



ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM



TRANSPORTE E DESTINO

FRAGMENTOS DE BIÓPSIAS OU PEÇA CIRÚRGICA



*Fixados com formol tamponado 10%

BLOCOS DE PARAFINA OU LÂMINAS DERIVADOS DE BIÓPSIAS OU PEÇA CIRÚRGICA



LÂMINAS COM PREPARADOS CITOPATOLÓGICOS

ESFREGAÇOS CITOCESTRIFUGADOS OU IMPRINTS FIXADOS



*Fixados com álcool 70 % ou spray fixador

FRAGMENTOS PARA ESTUDO DE IF




Meio de Michel

Formol tamponado 10%


LAUDO DO EXAME HISTOPATOLÓGICO

APLICÁVEL PARA REVISÃO DE CASO
OU ESTUDO COMPLEMENTAR DE
IMUNO-HISTOQUÍMICA
OU HIBRIDIZAÇÃO

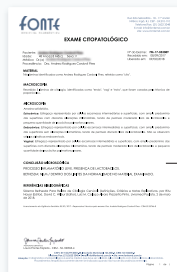

LAUDO DO EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO

APLICÁVEL PARA REVISÃO DE CASO
OU ESTUDO COMPLEMENTAR DE
HIBRIDIZAÇÃO

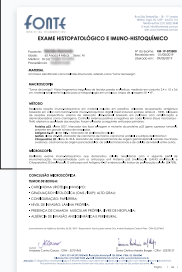

PEDIDO MÉDICO CARIMBADO E ASSINADO PELO SOLICITANTE




CÓPIA DO RG DO PACIENTE SE APLICÁVEL, CARTEIRA DO CONVÊNIO MÉDICO



EMBALAGEM PRIMÁRIA

A PROVA DE
VAZAMENTO
(LÍQUIDOS)
OU RECIPIENTE
RESISTENTE

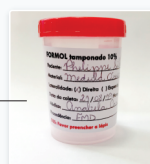

AMOSTRAS SÓLIDAS OU
SEMI-SÓLIDAS


EMBALAGEM SECUNDÁRIA

PARA CONTER
A EMBALAGEM
PRIMÁRIA



EMBALAGEM TERCIÁRIA

PARA TRANSPORTE,
COM IDENTIFICAÇÃO
DO REMETENTE,
DESTINATÁRIO E
DECLARAÇÃO DE
CONTEÚDO

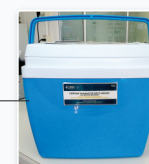

PESSOALMENTE



TRANSPORTE PELO MENSAGEIRO DO LABORATÓRIO



ENVIO PELO CORREIO ou TRANSPORTADORA CONTRATUALIZADA

